

Anleitung


AFH Körpermassager Deep Friction^{Deluxe}



Kabelloser Massagestab mit verschiedenen Vibrationsprogrammen und Intensitätsstufen.

Spezifikation


- » Kategorie: Massagegerät (kabellos)
- » Material: Silikon + ABS
- » Funktion: 5 Geschwindigkeiten, 30 Vibrationsprogramme
- » Stromversorgung: Wiederaufladbar über USB
- » Größe: 315 x 55 mm (12,4 x 2,2")
- » Nettogewicht: 261 g (9,2 oz)

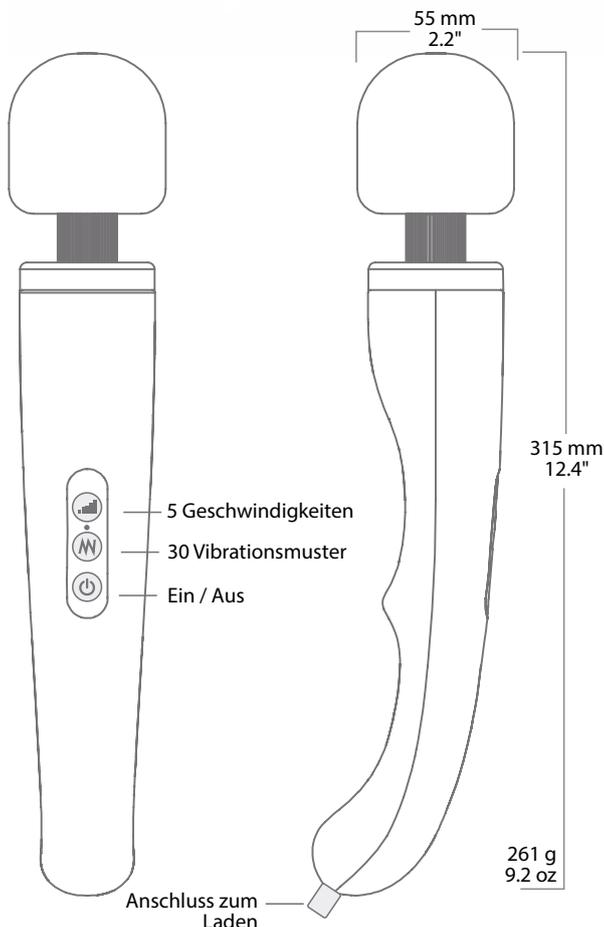


Bedienung und Einstellungen

1. Drücken Sie lange  zum Ein-/Aus schalten, die rote LED leuchtet. Das erste Vibrationsprogramm beginnt zu vibrieren.
2. Drücken Sie kurz  um das Vibrationsprogramm zu ändern. Durch wiederholtes Drücken der Taste  blättern Sie durch die verschiedenen Vibrationsprogramme. Es stehen insgesamt 30 Vibrationsprogramme zur Verfügung. Nach dem 30. Vibrationsprogramme folgt wieder das 1. Vibrationsprogramm.
3. Drücken Sie bei einem beliebigen Vibrationsprogramm kurz auf , um die Intensität/Geschwindigkeit zu ändern. Durch wiederholtes Drücken der Taste  blättern Sie durch die verschiedenen Geschwindigkeiten. Es stehen insgesamt 5 Intensitätsstufen/Geschwindigkeiten zur Verfügung. Nach der 5. Geschwindigkeit folgt wieder die 1. Geschwindigkeit.
4. Drücken Sie lange auf , um das Gerät auszuschalten.



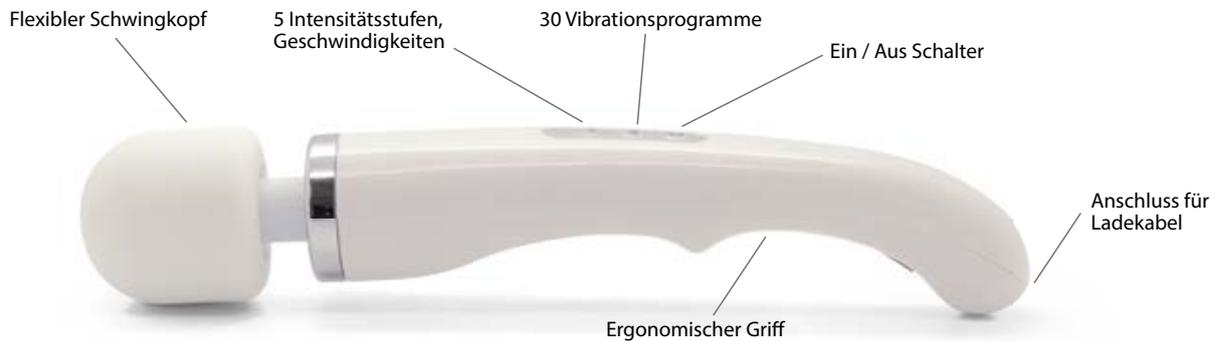

USB-Aufladung

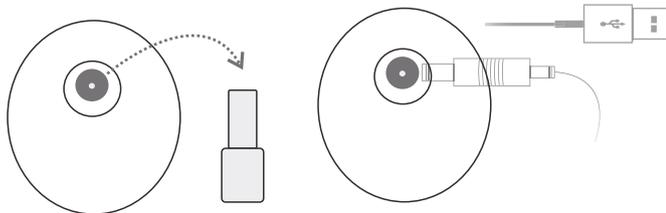

- » Nehmen Sie den Stecker an der Unterseite des Griffs heraus und verbinden Sie das USB-Kabel zum Aufladen (die Blaue LED blinkt während des Ladevorgangs)
- » **Ladezeit:** ca. 2 Stunde (die Blaue LED leuchtet nach vollständiger Aufladung dauerhaft)
- » **Betriebszeit:** ca. 1 Stunde



Bitte beachten Sie, dass das Gerät während des Ladevorgangs nicht funktioniert, ziehen Sie daher bitte das Ladekabel ab, bevor Sie das Gerät einschalten.

Flexibler Schwingkopf



Sicherheit

- » Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen über 75 °C.
- » Beenden Sie die Anwendung, wenn irgendwelche Beschwerden auftreten.
- » Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie feststellen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß oder beschädigt ist.
- » Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Pflege und Aufbewahrung

- » **Reinigen:** Bitte reinigen Sie das Produkt mit warmem Wasser oder antibakterieller Seife. Wischen Sie das Produkt mit einem sauberen Tuch oder Handtüchern trocken.
- » **Achtung!** Reinigen Sie dieses Produkt niemals mit organischen Reinigungsmitteln, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- » **Aufbewahren:** Bewahren Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort auf.



Um Verletzungen oder eine Verschlimmerung bereits bestehender Verspannungen zu vermeiden, sollte dieses Gerät nicht verwendet werden, wenn Hautverletzungen, geschwollene, bzw. entzündete Stellen, vorhanden sind.

