

TheraPIE Knete

Gebrauchsanweisung



DE Nicht für Kinder unter 3 Jahren | Nicht zum Verzehr geeignet

EN Not for children under 3 years | Not for consumption



FR Pas pour les enfants de moins de 3 ans | Non destiné à la consommation



IT Non per bambini sotto i 3 anni | Non per il consumo

DE Gebrauchsanweisung beachten | Medizinprodukt | Einzelner Patient – mehrfach anwendbar

FR Respecter les instructions d'utilisation | dispositif médical | Patient unique - applications multiples

EN Observe the instructions for use | medical device | Single patient - multiple applications

IT Osservare le istruzioni per l'uso | dispositivo medico | Paziente singolo - applicazioni multiple

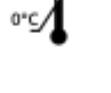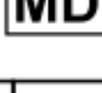

FG-Health Concepts GmbH
Baarerstrasse 101, CH-6300 Zug



AFH Webshop® Rainer Zumhasch, Pyrmonter Straße 50,
D-32676 Lügde, www.premium-therapie.de

DE AFH TheraPIE Knete

Zweckbestimmung:

Bei diesem Medizinprodukt handelt es sich um latexfreie Therapieknete mit welcher durch spezielle Finger- und Handübungen eine Bewegungs- und Funktionsverbesserung des neuromuskulären Regelkreises erzielt wird.

Indikationen:

Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit der Hand

Kontraindikationen:

Erkrankungen der Haut im Handflächenbereich, z.B.: (Neurodermitis, offene Wunden)

Anwendungsrisiken / Wichtige Hinweise

- TheraPIE Knete indikationsgerecht einsetzen
- gleichzeitige Nutzung mit anderen Produkten nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Therapeuten
- keine Änderungen am Produkt vornehmen
- nicht bei offenen Wunden im Handflächenbereich verwenden
- kein Wiedereinsatz – dieses Hilfsmittel ist zur Versorgung eines Patienten bestimmt

- Achtung: nicht zum Verzehr geeignet
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
- Nicht auf Kleidung oder andere Textilien bringen
- Wurde Knete ins Auge gebracht, waschen Sie das Auge mit Wasser aus. Suchen Sie ggf. einen Arzt auf
- Bei Schmerzen, Rötungen, Schwellungen und sonstigen Problemen ist die Übungsfrequenz, bzw. der Widerstand herabzusetzen oder das gesamte Übungsprogramm zu beenden.

Anwendungsanleitung

Sprechen Sie Anwendung und Dauer mit Ihrem verordnenden Arzt ab. Die Auswahl der geeigneten

Festigkeit und eine Einweisung erfolgt durch das Fachpersonal, von dem Sie das Medizinprodukt erhalten haben.



Handgelenksflexion



Fingerspitzengriff



Fingerextension



Handflächen Kugelrollen

Aufbewahrung / Lagerung

Aufgrund des viskosen Fließverhaltens der Therapieknete, sowie gegen Verunreinigung sollte die Therapieknete stets in der verschlossenen Dose, bei Raumtemperatur, aufbewahrt werden.

Materialzusammensetzung

Silikonöl (82%), Siliciumdioxid (15%), Borsäure (<2%), Farbpigmente (1%).

Reinigungshinweise:

Die Therapieknete kann nicht gereinigt werden. Bitte waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände vor dem Gebrauch gründlich.

Gewährleistung

Für das erworbene Produkt gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie das Produkt bezogen haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhandel, sollten Sie einen Gewährleistungsfall vermuten. Bitte das Produkt vor Einreichung eines Gewährleistungsfalles reinigen. Wurden beiliegende Hinweise der Gebrauchsanweisung nicht ausreichend beachtet, so kann die Gewährleistung beeinträchtigt werden bzw. entfallen.

Ausgeschlossen ist eine Gewährleistung bei nicht indikationsgerechter Anwendung, Nichtbeachtung der Anwendungsrisiken, -hinweise sowie eigenmächtig vorgenommenen Änderungen am Produkt.

Nutzungsdauer / Lebensdauer des Produkts

Die Lebensdauer der TheraPIE Knete wird durch den natürlichen Verschleiß bei sach- und anwendungsgemäßem Umgang bestimmt. Nach Abschluss der Behandlung, Therapie oder des individuell angepassten Trainings die Therapie Knete fachgerecht zu entsorgen.

Meldepflicht

Kommt es bei der Anwendung des Medizinproduktes zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes, dann melden Sie dies Ihrem Fachhändler oder uns als Hersteller sowie dem BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Sind Sie in der Schweiz ansässig, wenden Sie sich bei Reklamationen an unseren Schweizer Bevollmächtigten unter:

info@fg-health.ch oder direkt an die Swissmedic.

Entsorgung:

Nach Nutzungsende muss das Produkt entsprechend örtlicher Vorgaben entsorgt werden.

Konformitätserklärung

Wir bestätigen, dass dieses Produkt den Anforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates entspricht.